

Quoi de neuf

Système MiniMed^{MC} 780G avec le capteur Simplera Sync^{MC}

Améliorations du logiciel de la pompe à insuline



Icône de durée de vie du capteur




Une icône rouge affichant le chiffre un apparaîtra lorsqu'il restera une journée de vie au capteur.




Lorsque le capteur expire, l'icône devient noire avec un X. N'oubliez pas que vous pouvez toujours voir le nombre de jours de vie restants de votre capteur en consultant votre écran d'état.

Mises à jour du débit basal

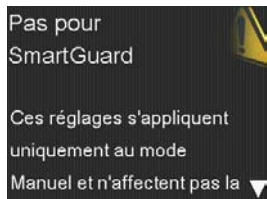

Non applicable à SmartGuard^{MC}

Un rappel que les ajustements apportés à ce paramètre n'ont d'incidence sur l'administration d'insuline que lorsque vous êtes en mode Manuel. Ce paramètre n'a aucune incidence sur la technologie SmartGuard^{MC}.

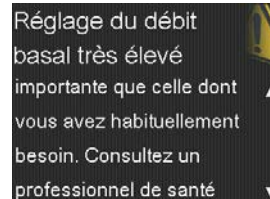

Débit basal très élevé

Un message qui s'affiche lorsque le système calcule que le profil de débit basal en mode Manuel programmé administrera plus d'insuline que ce dont vous avez habituellement besoin.

Liste de vérification SmartGuard^{MC}

List. vérif. SmartGuard	
Glyc. OK pour SmartGuard	✓
SmartGuard activé	✓
Capteur OK	✓
Aucun bolus en cours	✓
Admin. non interrompue	✓
Ratio de glucides défini	✓

La liste de vérification mise à jour fournit plus de détails sur la façon d'activer la fonction SmartGuard^{MC}.

Rappel de changement du dispositif de perfusion

Rappels	
Réservoir bas	
Remplacer cathéter	
Glyc. après bolus	
Bolus repas oublié	
Personnels	

Le rappel de changement du dispositif de perfusion est maintenant disponible pour 2 à 3 jours ou 7 jours si vous utilisez le dispositif de perfusion de Extended^{MC}.

Mises à jour du réservoir

Réservoir + cathéter	
Nouv. réservoir + cath.	
Nouv. réserv. uniquem.	
Nouv. cathéter uniquem.	
Purge canule	

Réservoir mis à jour

Il est possible de changer uniquement le réservoir ou uniquement le dispositif de perfusion dans les situations où les deux ne sont pas changés en même temps.

Mise à jour du bolus

Assistant bolus	
Glyc. 7.4 mmol/l	0.6 u
Glu 30 g	2.0 u
Réglage	0.0 u
Bolus	2.6 u
Administration de bolus	

La lecture de glycémie peut maintenant être saisie directement dans l'assistant de bolus MiniMed^{MC} et la fonction de bolus SmartGuard^{MC}. Moins d'étapes pour entrer une lecture de glycémie dans votre pompe.

Insertion et jumelage du capteur Simplera Sync^{MC}


Dispositif d'insertion, transmetteur et capteur tout-en-un. Aucune calibration requise¹

Site d'insertion



À partir de 7 ans

Partie supérieure du
dos des bras

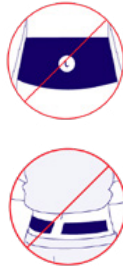


Le capteur Simplera Sync^{MC} est indiqué uniquement pour une utilisation à la partie supérieure du dos des bras. N'utilisez pas le capteur Simplera Sync^{MC} sur l'abdomen ou d'autres sites corporels, y compris les fesses, en raison de performances inconnues ou différentes qui pourraient entraîner une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

L'insertion sur l'abdomen et la partie supérieure des fesses n'a pas été évaluée pour son exactitude.


Insertion du capteur



Sélectionner et nettoyer le site d'insertion.

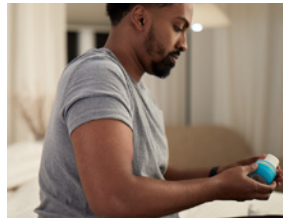

Tourner pour ouvrir le capuchon du dispositif d'insertion et s'assurer que la bande inviolable est intacte.

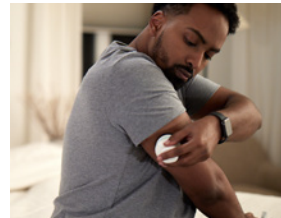

Appuyer le dispositif d'insertion rapidement et fermement contre le corps jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Utiliser un doigt pour lisser l'adhésif.

Dissocier le capteur actuel

1. Aller au **menu principal**;
2. Sélectionner **Appareils appairés**;
3. Sélectionner votre capteur;
4. Sélectionner **Désappairer** et confirmer **Oui**;

Jumeler le capteur

Aucune dissociation n'est requise avec le capteur Simplera Sync^{MC}. Jumelez votre nouveau capteur et l'ancien se déconnecte automatiquement.




Aller au **menu principal**
Sélectionner **Appareils appairés**
Sélectionner **Appairer nouvel appareil**



Sélectionner l'appareil CGM dont **le numéro de série correspond** à celui figurant sur le dessus du dispositif d'insertion



Confirmer le **CODE**

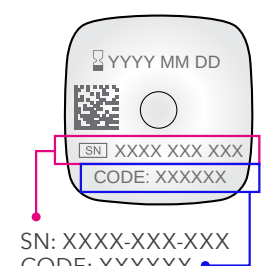

SN: XXXX-XXX-XXX
CODE: XXXXXX

1. Une lecture de glycémie est nécessaire pour accéder à la fonction SmartGuard^{MC}. Si les alertes de glucose et les lectures CGM ne correspondent pas à vos symptômes, utilisez un glucomètre pour prendre des décisions liées à la gestion du diabète.