

Système MiniMed^{MC} 780G

Guide de mise à jour du logiciel



Sommaire

Processus de mise à jour du logiciel	2
Étape 1 : préparez-vous	4
Étape 2 : téléchargez la mise à jour	12
Étape 3 : installez la mise à jour	16
Étape 4 : validez la liste de contrôle	24
Annexe	28

Remarque : Ce guide utilise des écrans d'application spécifiques des appareils iOS®. Les écrans et les fenêtres contextuelles peuvent varier selon le système d'exploitation ou le modèle du téléphone.

Processus de mise à jour du logiciel

Meilleures pratiques



- Effectuez la mise à jour tôt dans la journée.
- Le téléchargement et l'installation du logiciel prendront 2 à 3 heures.
- Assurez-vous que votre téléphone est entièrement chargé et que votre pompe affiche l'icône de batterie en vert.

Ce processus se compose de deux étapes : le logiciel est d'abord ajouté à l'application sur votre téléphone, puis il est installé sur votre pompe.



Les mises à jour du logiciel de votre pompe sont désormais gérées dans l'application MiniMed^{MC} Mobile. Si vous utilisez déjà l'application MiniMed^{MC} Mobile, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente disponible sur votre boutique d'applications. Si vous ne l'utilisez pas encore, ce guide vous indiquera les étapes à suivre.

Étape 1 : préparez-vous

1. Enregistrez les réglages de votre pompe.
2. Téléchargez l'application MiniMed^{MC} Mobile, le cas échéant.
3. Connectez-vous ou configurez CareLink^{MC} Personal.
4. Synchronisez vers CareLink^{MC} (peut prendre plusieurs minutes).

Étape 2 : téléchargez la mise à jour

1. Téléchargez la mise à jour sur votre téléphone.
 - L'opération prend 45 à 90 minutes, selon votre débit d'Internet.
2. L'application contrôlera votre pompe pour vérifier si une mise à jour logicielle est nécessaire.
 - Cette opération peut prendre jusqu'à 10 minutes.
3. Utilisez votre pompe et votre téléphone comme d'habitude, mais ne forcez pas la fermeture de l'application MiniMed^{MC} Mobile.
4. Déconnectez-vous de votre pompe.

Étape 3 : installez la mise à jour

Lors de cette étape, aucune valeur de taux de glucose ou notification ne sera envoyée à votre pompe ou à votre partenaire de soins.

1. Installez le nouveau logiciel sur votre pompe.
 - Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.
2. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.

Étape 4 : validez la liste de contrôle

1. Vérifiez que les paramètres personnels de votre pompe ont été transférés.
 - Vérification de la mise à jour pendant 15 minutes.

Remarque :

Une fois la mise à jour effectuée, la technologie SmartGuard^{MC} s'initialise pendant 5 heures.



Rappel important :

Pendant la mise à jour du logiciel, assurez-vous que votre pompe et votre téléphone ne soient jamais séparés de plus de 3 mètres (10 pieds).



Préparez-vous

☐ Pour confirmer vos réglages à la fin de la mise à jour, vous devrez avoir noté vos réglages actuels (les pages 5 à 6 vous guideront tout au long de ce processus).

☐ Avez-vous déjà installé l'application MiniMed^{MC} Mobile?

Oui : super! Continuez, passez à la page 11. **Remarque** : si vous n'avez pas utilisé l'application depuis longtemps, nous vous recommandons de la supprimer et de réinstaller la version la plus récente afin de vous assurer que tout se passe bien.

Non? Pas de problème : rendez-vous à la page 7 et nous vous guiderons pour son installation.

☐ Synchronisez vos données CareLink^{MC} Personal par le biais de l'application MiniMed^{MC} Mobile (page 11).

Une fois toutes ces étapes terminées, rendez-vous à la section « Téléchargez la mise à jour » à la page 12.

Trouvez vos réglages

Conseil : pour éviter que votre pompe se mette en pause pendant que vous trouvez et enregistrez vos réglages, pensez à prolonger le **rétroéclairage** à 3 minutes avant de commencer. Accédez à **Réglages > Réglages de l'appareil > Affichage** pour régler la durée.



Rendez-vous dans votre menu principal et sélectionnez SmartGuard.

Appuyez sur la flèche vers le bas et sélectionnez les réglages SmartGuard.

- Enregistrez votre objectif.
- Enregistrez votre réglage Bolus de correc. auto.
- Appuyez sur la flèche Retour pour revenir au menu principal.



À partir du menu principal, sélectionnez Insuline.

Appuyez sur la flèche vers le bas et sélectionnez les réglages d'administration.

- Consignez les réglages de votre bolus.
- Consignez les réglages de votre débit basal.
- Enregistrez votre débit basal max et votre bolus max.
- Appuyez sur la flèche Retour pour revenir au menu principal.



À partir du menu principal, sélectionnez Réglages et Réglages des alertes.

Appuyez sur la flèche du bas et sélectionnez Alerte hyper.

- Enregistrez vos réglages pour l'alerte Hyper.
- Enregistrez vos réglages pour l'alerte Hypo.



Enregistrez les réglages actuels de votre pompe ci-dessous :

Fonction SmartGuard^{MC}

Objectif SmartGuard	5,5 6,1 6,7
Correction automatique	OUI NON

Bolus

Assistant bolus			OUI NON				
Ratio de glucides		Durée d'insuline active	Sensibilité à l'insuline		Objectifs glycémiques		
Heure	g/U	Heure	Heure	mmol/l par U	Heure	Bas	Haut

Enregistrez les réglages actuels de votre pompe ci-dessous (suite):

Basal

Basal 1

Total sur 24 h	
Heure	U/h

Basal 2

Total sur 24 h	
Heure	U/h

Max Basal	U/h
Max Bolus	U/h

Alertes Hyper			OUI NON	
Heure de début	Réglage Hyper	Alerte Hyper	Alerte avant hyper	Limite vit. montée
		OUI NON	OUI NON	OUI NON
		OUI NON	OUI NON	OUI NON

Alertes Hypo				OUI NON	
Heure de début	Réglage Hypo	Suspendre	Alerte Hypo	Alerte avant hypo	Alerte Reprendre déb. basale
			OUI NON	OUI NON	OUI NON
			OUI NON	OUI NON	OUI NON

Configurer l'application MiniMed^{MC} Mobile



Apple Store



Google Store

Téléchargez d'abord l'application MiniMed^{MC} Mobile à partir de la boutique d'applications sur votre téléphone Android ou iOS. Ensuite, ouvrez l'application et lisez les écrans d'introduction.

Vous aurez besoin de vous connecter au logiciel CareLink^{MC} Personal. Vous n'avez pas de compte? Suivez les étapes ci-après pour vous enregistrer.

Si vous avez un compte CareLink^{MC} Personal, mais que vous avez oublié votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, **ne créez pas un deuxième compte pour votre mise à jour**. Il est important de lier ce compte pour conserver l'ensemble de vos données. Vous pouvez sélectionner. **Vous avez oublié votre nom d'utilisateur/mot de passe?** sur le site carelink.minimed.eu.

Inscrivez-vous à CareLink^{MC} Personal

1. Ouvrez l'application et lisez les écrans d'introduction.
2. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à ce que l'écran **S'inscrire à CareLink^{MC} Personal** s'affiche.
3. Appuyez sur **Créer un compte** pour vous enregistrer ou sur **Connexion** si vous avez déjà un compte.



Cela vous envoie sur le site carelink.minimed.eu pour vous inscrire avec un nouveau compte.



L'application ne se télécharge pas?


Vérifiez la compatibilité de votre téléphone en scannant le code QR ou en consultant le lien ci-dessous.
<https://www.minimed.com/fr-ca/produits/compatibilite>.

Un appareil mobile compatible est nécessaire pour terminer la mise à niveau. Vous n'en possédez pas? Vous pouvez emprunter un téléphone à un ami ou à un membre de votre famille juste le temps du processus de mise à niveau.

Appairage de l'application MiniMed^{MC} Mobile avec votre pompe

Après votre inscription, vous devrez **accepter** le Contrat de licence de l'utilisateur final et confirmer sur la fenêtre contextuelle pour continuer. L'application vérifiera ensuite votre modèle de pompe et vous guidera tout au long du processus d'appairage. Suivez les instructions à l'écran sur l'application.

D'abord, sur votre téléphone :

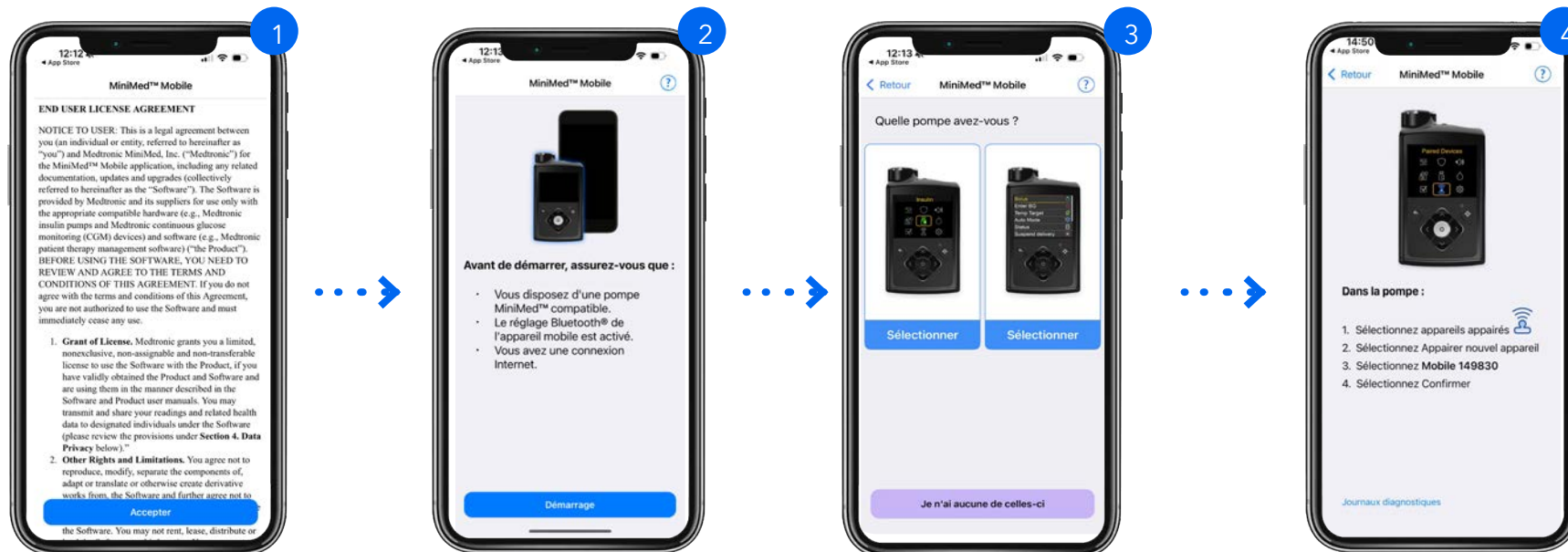

Ensuite, sur votre pompe :



Le processus d'appairage est lancé sur la pompe, mais vous devez également garder un œil sur votre téléphone. Pour démarrer, accédez au **menu principal** de votre pompe.

Sélectionnez **Appairer nouvel appareil**.

Sélectionnez le **numéro d'appareil mobile** qui correspond à celui indiqué sur l'écran de votre application.



Sélectionnez **Confirmer** sur votre pompe.



Votre téléphone affichera l'écran d'appairage. Appuyez sur **Autoriser, Accepter ou Appairer** sur toutes les fenêtres contextuelles.




Une fois l'appairage terminé, votre pompe reviendra au menu **Appareils appairés** et votre appareil mobile affichera une **icône pompe et téléphone mobile avec une coche bleue**, comme illustré ici.

Votre téléphone et votre pompe sont maintenant appairés.

Finalisez la configuration de l'application MiniMed^{MC} Mobile

Revenez à votre téléphone et lisez l'avertissement relatif aux décisions d'administration d'insuline, qui indique que les décisions de dosage d'insuline ne doivent pas être basées sur l'application MiniMed^{MC} Mobile. Appuyez sur **OK** et sur **Accepter** sur la fenêtre contextuelle.

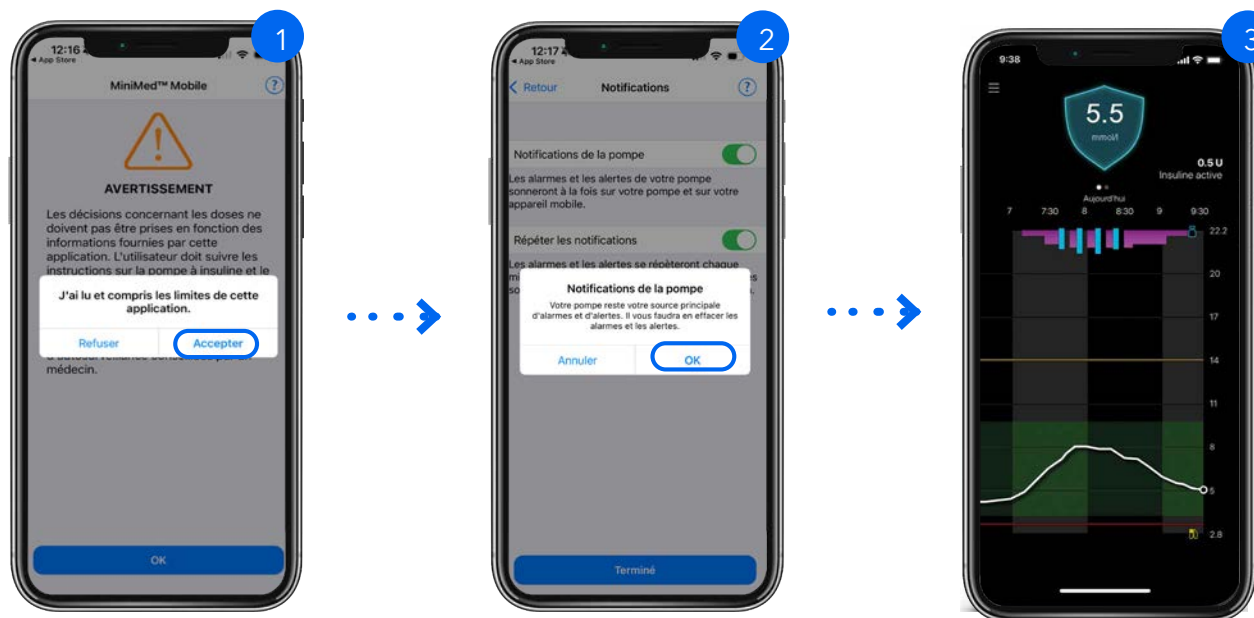

Il vous sera ensuite demandé de confirmer vos réglages de notification. La valeur par défaut est **activée**. Si ces réglages sont **désactivés, vous ne recevrez les notifications que sur votre pompe et NON sur votre téléphone mobile**.

Une fois que MiniMed^{MC} Mobile s'est synchronisée, vous verrez vos données sur l'écran d'accueil. Cette opération peut prendre quelques minutes.




L'application MiniMed^{MC} Mobile est désormais configurée et vous pouvez commencer la mise à jour.

Synchronisation vers CareLink^{MC} Personal

Enfin, avant de démarrer la mise à jour, il est recommandé de **synchroniser les données existantes de votre pompe** avec votre compte CareLink^{MC} Personal. Pour ce faire, utilisez l'application MiniMed^{MC} Mobile en suivant les instructions ci-après.

**Commencez
ici**

si l'application
MiniMed^{MC} Mobile
est déjà installée sur
votre téléphone.

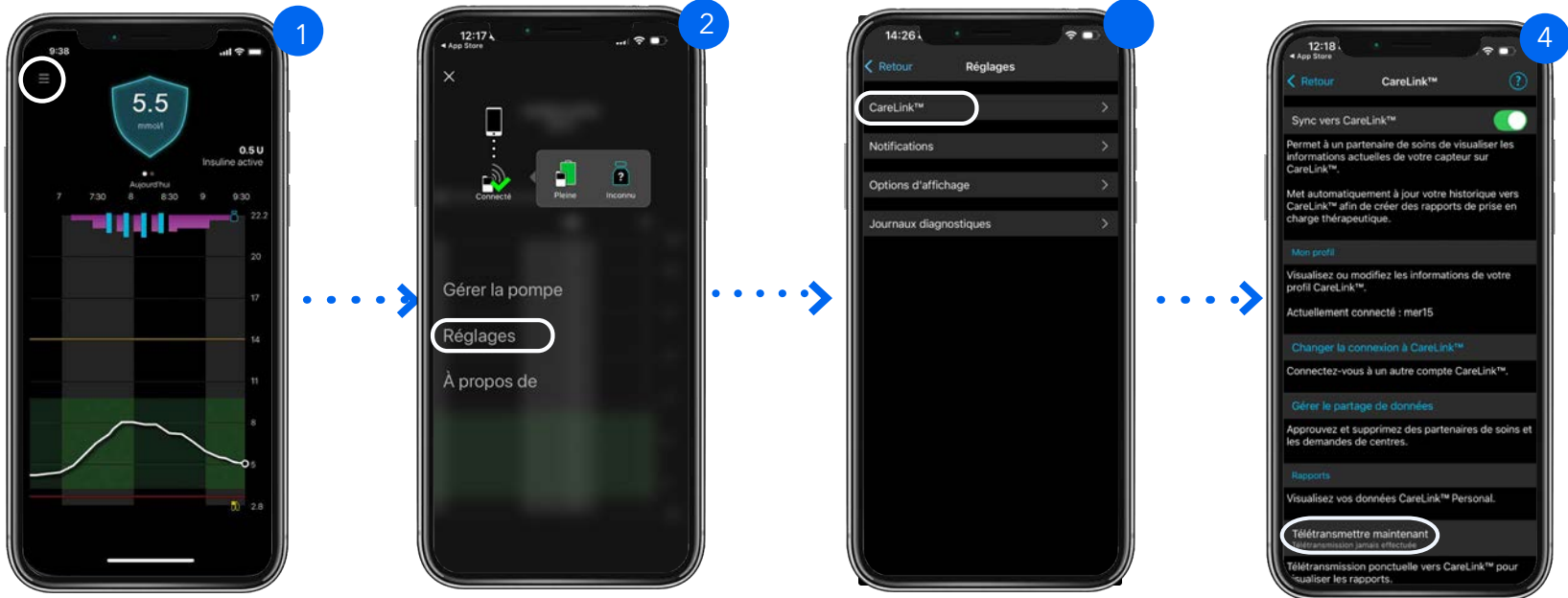

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du **menu principal**.

Touchez l'option **Réglages**.

Touchez l'option **CareLink^{MC}**.

Appuyez sur **Télétransmettre maintenant** pour synchroniser vos données avec votre compte CareLink^{MC} Personal. Cette opération peut prendre quelques minutes.

Une fois la synchronisation des données terminée, appuyez sur **Retour** sur votre application pour revenir à l'**écran d'accueil**.


Revenez à la page suivante pour lancer la mise à jour du logiciel.

Téléchargez la mise à jour



Recherchez des mises à jour

Assurez-vous de bénéficier d'une connexion Internet fiable, de préférence en Wi-Fi.

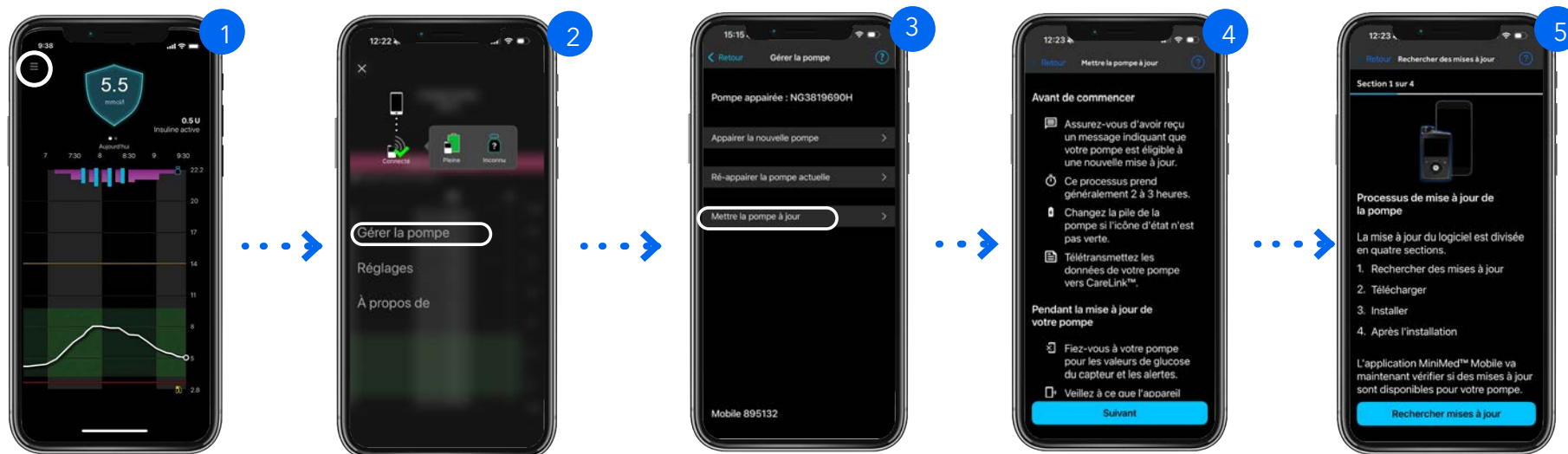


Sur l'application MiniMed^{MC} Mobile, accédez au **menu principal** dans le coin supérieur gauche.

Appuyez sur **Gérer la pompe**.

Appuyez sur **Mettre la pompe à jour**. Remarque: L'**option Mettre à jour la pompe** peut apparaître dans le menu principal dans certaines versions logicielles.

Lisez la liste **Avant de commencer**. Appuyez sur **Suivant**.


Appuyez sur **Rechercher des mises à jour**.

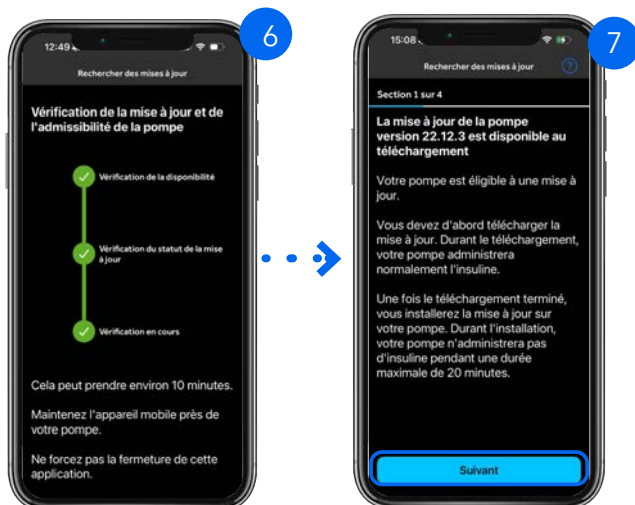

Appuyez sur **Suivant** pour démarrer le processus de téléchargement et passez à la page 14.

 La version de votre logiciel peut être différente de ce que vous voyez ci-contre.

Des problèmes avec la mise à jour? Si vous voyez apparaître les écrans ci-dessous, cela signifie que vous avez manqué une étape requise ou que votre appareil peut ne pas être admissible pour la mise à jour. Appelez l'assistance MiniMed au 1-800-284-4416 pour obtenir de l'aide.

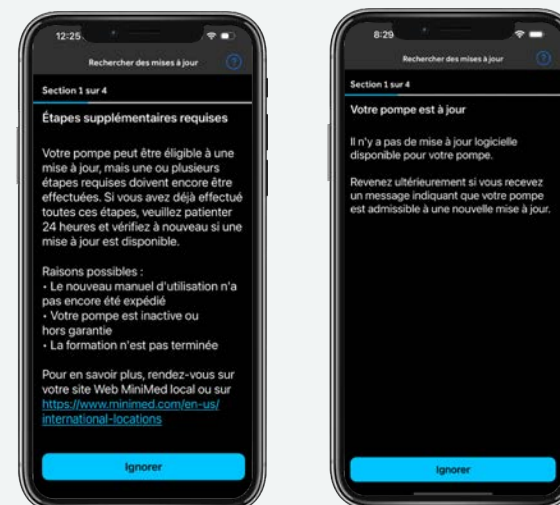

Consultez la section relative au dépannage (Annexe D) si vous ne voyez pas l'option « Mettre à jour la pompe ».

Téléchargez la mise à jour



Passez en revue et confirmez les déclarations en cochant les cases.



Faites défiler l'écran pour passer en revue et confirmer tous les éléments, puis appuyez sur **Suivant**.



Appuyez sur **Télécharger**.



Suivez les instructions de votre application.



Le téléchargement prendra 45 à 90 minutes. Vous pourrez éventuellement voir le temps restant augmenter ou diminuer en fonction de votre connexion Internet et de votre utilisation du téléphone.



NE FORCEZ PAS LA FERMETURE DE L'APPLICATION pendant le téléchargement.

Un balayage de la fenêtre de l'application vers le haut (sur iOS par exemple) annule le téléchargement. Vous pouvez par ailleurs continuer d'utiliser normalement votre téléphone et votre pompe, notamment prendre des appels, répondre à des messages et utiliser d'autres applications. †

† L'utilisation d'autres applications/appareils Bluetooth peut ralentir le téléchargement.



Une fois que le téléchargement du logiciel est terminé, l'application commence automatiquement à vérifier votre pompe. Cette opération peut prendre jusqu'à **10 minutes**. Si la vérification échoue, réessayez et si cela ne fonctionne pas, consultez la section relative au dépannage (annexe D) à la fin de ce guide.




Appuyez sur **Suivant** pour passer à la liste de vérification avant l'installation.

Installez la mise à jour



Installez la mise à jour

L'application MiniMed^{MC} Mobile vous informera que la mise à jour du logiciel est prête pour l'installation.

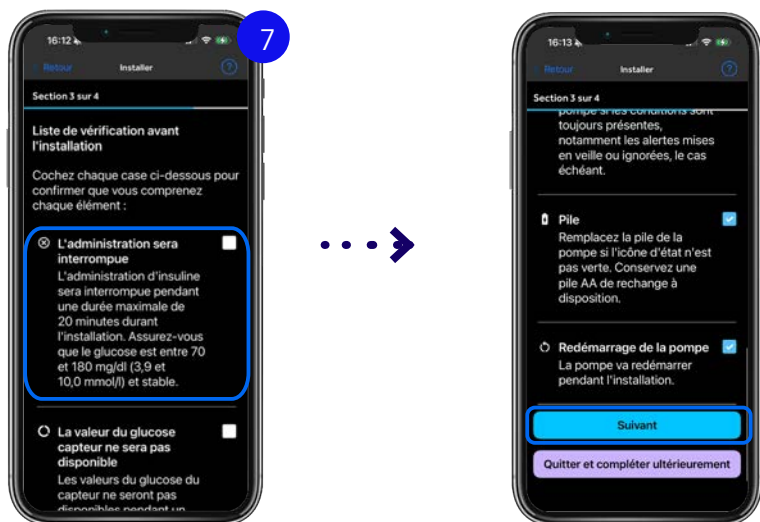

Lisez chaque élément et cochez les cases correspondantes pour confirmer.

Appuyez ensuite sur **Suivant**.



Remarque : cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes. Si le moment n'est pas opportun, vous pouvez la mettre en pause et la reprendre ultérieurement. Cependant, assurez-vous de **la terminer le même jour que le téléchargement afin d'éviter de répéter le processus**.

Appuyez sur **Quitter et compléter ultérieurement** pour continuer plus tard.



Important : veuillez mettre en pause avant de continuer. Les prochaines étapes sont essentielles pour terminer la configuration avec succès. Pour garantir une expérience agréable, **assurez-vous que votre pompe et votre téléphone sont côte à côte** avant de continuer. Vous devrez vous reporter aux deux appareils tout au long du processus. Prendre le temps de préparer l'opération aidera à rendre l'expérience aussi agréable que possible.



Votre pompe doit se trouver sur l'écran d'accueil avant le démarrage de l'installation.


8

Sur votre téléphone :



Posez votre téléphone et prenez votre pompe. Votre pompe doit se trouver sur l'écran d'accueil (comme illustré à droite) avant le démarrage de l'installation.

Sur votre pompe :

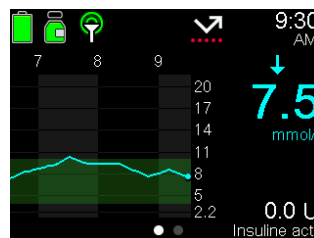

OU



9

Sur votre téléphone :

Si vous avez confirmé que votre pompe se trouve sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Confirmer** sur votre téléphone.



10

Cet écran apparaît brièvement.

Sur votre téléphone :




Posez votre téléphone et prenez votre pompe.



11


Sélectionnez **Continuer** sur votre pompe pour démarrer l'installation.

Sur votre pompe :

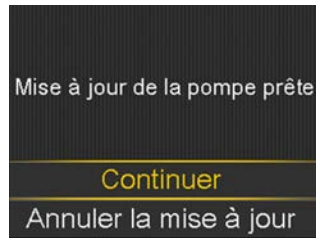

Quand vous avez sélectionné **Continuer** sur votre pompe, appuyez sur le message **J'ai appuyé sur le bouton « Continuer » de la pompe pour démarrer l'installation** de votre téléphone, puis sur **Confirmer**.

Sur votre téléphone :

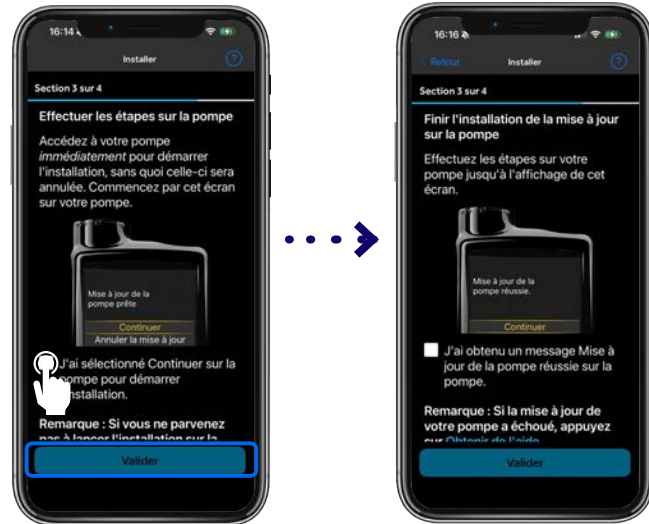


Encore un petit effort, vous y êtes presque!

Sur la prochaine page, suivez les étapes 12a à 12f pour terminer l'installation de la mise à jour de votre pompe.

Sur votre téléphone :


12

Terminez l'installation de la mise à jour sur votre pompe grâce aux étapes suivantes.

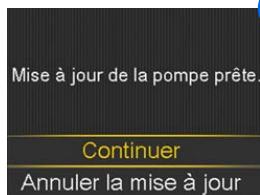

Confirmez que vous voyez cet écran sur votre pompe. Sélectionnez **Continuer**.

a

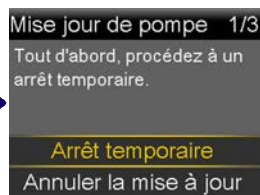

Sélectionnez **Arrêt temporaire**.


b



Déconnectez-vous de votre pompe. Sélectionnez **Valider**.




c

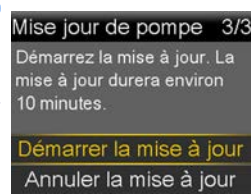

Sélectionnez **Démarrer la mise à jour**.

d

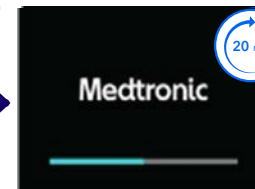


La mise à jour va s'installer. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.

e

Si la mise à jour n'aboutit pas, reconnectez votre cathéter. Votre pompe continuera de fonctionner avec le logiciel d'origine sans perte de données, et vous pourrez réessayer ultérieurement. Vous pouvez continuer à utiliser l'application MiniMed^{MC} Mobile jusqu'à ce que vous soyez prêt à réessayer la mise à jour. Si plusieurs tentatives échouent, reportez-vous à la section de dépannage (annexe D) à la fin de ce guide.

f

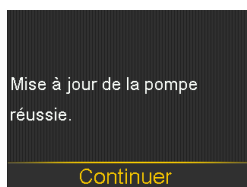

Mise à jour de la pompe réussie. Sélectionnez **Continuer**.




Initialisation de la fonction SmartGuard^{MC}:

Si vous étiez en train d'utiliser la fonction SmartGuard^{MC} avant la mise à jour, vous recevrez un avertissement sur votre pompe après la mise à jour afin d'indiquer que la fonction SmartGuard^{MC} mettra 5 heures pour se réinitialiser avant de pouvoir être utilisée de nouveau. Pendant cette période d'initialisation, vous serez en mode manuel. C'est pourquoi nous vous recommandons d'activer la fonction Arrêt hypo ou la fonction Arrêt prédictif avant hypo selon les directives de votre professionnel de santé.

13

Une fois que le message **Mise à jour de la pompe réussie** apparaît sur votre pompe, sur votre téléphone, appuyez sur le message **J'ai reçu le message « Mise à jour de la pompe réussie » sur la pompe**, puis sur **Confirmer**.

Sur votre pompe :

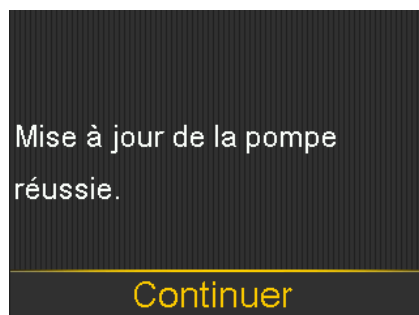

Sur votre téléphone :



Si vous n'avez pas vu le message **Mise à jour de la pompe réussie** sur votre pompe, sur votre téléphone, appuyez sur **Obtenir de l'aide** pour accéder aux instructions relatives au dépannage dans l'application. Vous pouvez également consulter la section relative au dépannage (annexe D) à la fin de ce guide.

Sur votre téléphone : Sur votre pompe :

Il vous sera rappelé de reprendre votre administration d'insuline basale si vous ne l'avez pas déjà fait. Confirmez que votre cathéter est reconnecté et que l'administration d'insuline a repris.



Connectez le cathéter au corps.
Reprenez l'administration basale ?
Oui Non

Connectez votre cathéter, puis sélectionnez **Oui**.




SmartGuard sera disponible dans 5 heures.
Envisagez d'activer Arrêt avant hypo ou Arrêt hypo dans Réglages d'alerte.

Message d'initialisation de SmartGuard^{MC} (le cas échéant).



La reprise de l'administration d'insuline a réussi.

Retournez sur votre téléphone. Appuyez sur **Suivant**.

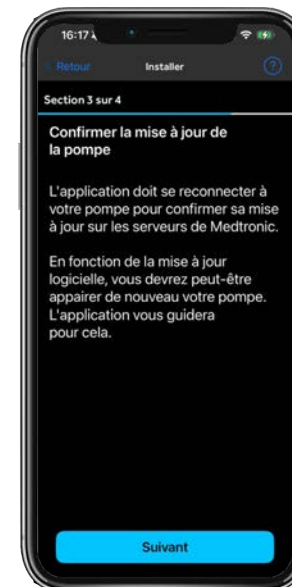


Appuyez à nouveau sur **Suivant**.

Vous devrez éventuellement désappairer, puis appairer votre pompe et votre appareil mobile.

Dans ce cas, l'application vous guidera tout au long des étapes à suivre.

Des instructions étape par étape sont également disponibles dans la section relative au dépannage de ce guide (annexe A).

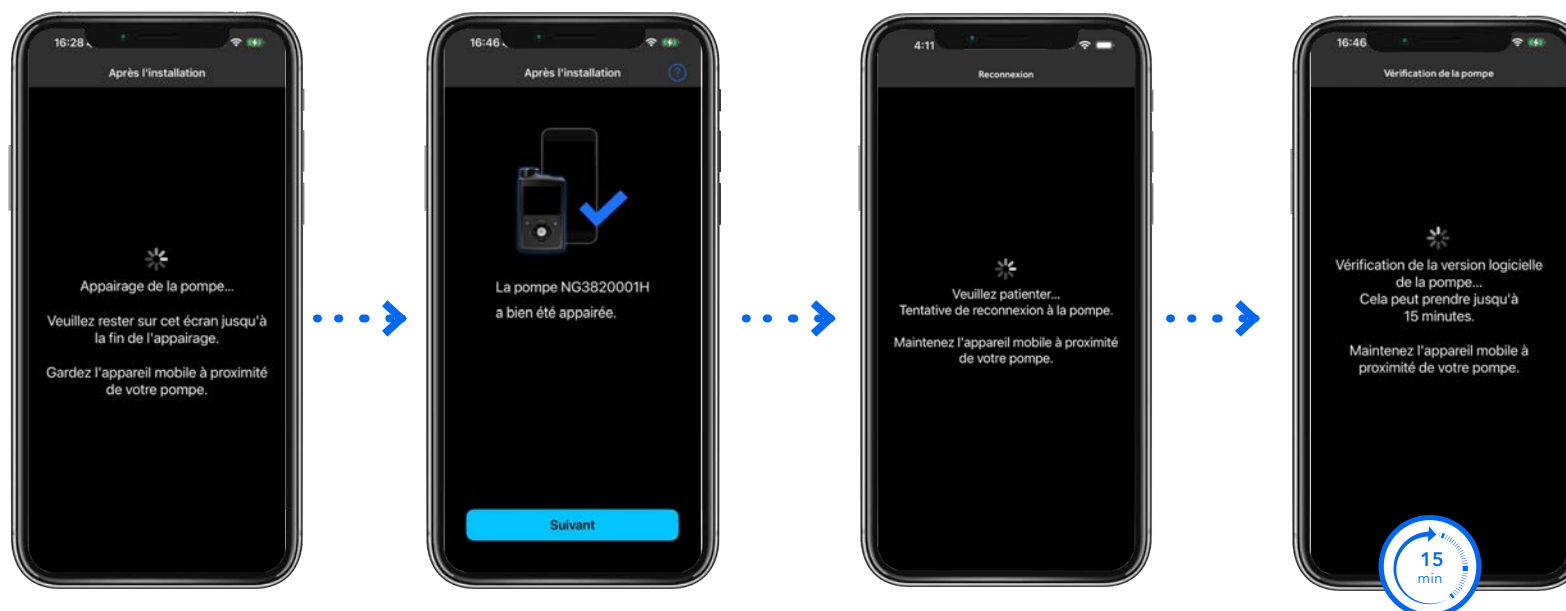

Votre téléphone se reconnectera à votre pompe après l'appairage et, lorsque la connexion sera établie, il entamera automatiquement une **vérification de 15 minutes du logiciel**.




Validez la liste de contrôle



Liste de vérification après l'installation

Veillez valider la liste de vérification après l'installation. La **liste de vérification après l'installation** s'affichera après vérification de la version du logiciel de la pompe. Vous devez lire chaque point, réaliser les actions éventuelles, puis cocher la case en appuyant dessus. Passez à la page suivante pour obtenir de l'aide sur l'endroit où trouver ces réglages.

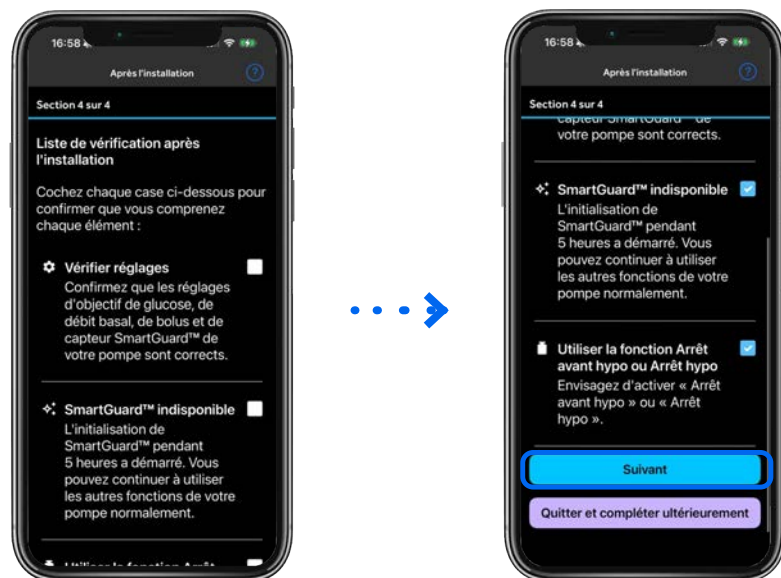


Après avoir vérifié et coché tous les points, appuyez sur **Suivant** pour continuer.



Une fois que vous avez terminé la liste de vérification, le message **Mise à jour logicielle réussie** s'affiche.

Félicitations! Votre pompe est maintenant à jour.

Appuyez sur **Retour à l'accueil** pour quitter la mise à jour et revenir à l'écran d'accueil de l'application MiniMed^{MC} Mobile.

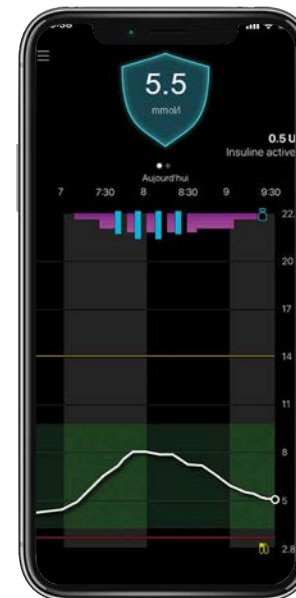

Confirmer les réglages transférés

Trouver mes réglages : menu principal

Vérifiez que les réglages de votre pompe correspondent aux réglages que vous avez enregistrés.



Réglages SmartGuard^{MC} :

- Confirmez votre objectif SmartGuard^{MC}.
- Confirmez le réglage de corrections automatique.



Réglages d'administration :

- Confirmez les réglages bolus et basal.



Appareils appairés :

- Confirmez que tous les appareils sont toujours appairés.



Réglages d'alerte :

- Confirmez les réglages des alertes d'hyper et d'hypo.





Les réglages Objectif SmartGuard^{MC} et Bolus de correc. auto conserveront la valeur **définie avant la mise à jour**.

La fonction SmartGuard^{MC} mettra **5 heures à s'initialiser avant de pouvoir** être utilisée.

Pendant cette période d'initialisation, vous serez en mode manuel . C'est pourquoi nous vous recommandons d'activer les fonctions Arrêt hypo et Arrêt avant hypo pour vous protéger jusqu'à ce que la technologie SmartGuard^{MC} puisse prendre le relais.

Suivez ces étapes pour activer l'une de ces fonctions :


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Sélectionner**.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez **Réglages d'alerte**.
4. Sélectionnez **Alerte basse**.
5. Sélectionnez **Arrêt hypo** ou **Arrêt avant hypo**, modifiez les valeurs et **enregistrez-les selon les directives de votre professionnel de santé**.

Prochaines étapes pour votre capteur

Si vous utilisez actuellement un transmetteur et capteur Guardian^{MC} 4, vous pouvez continuer de l'utiliser après la mise à jour. Vous devrez simplement suivre les étapes habituelles lorsque vous devrez changer de capteur.

Si vous passez à un capteur Simplera Sync^{MC}, vous pourrez commencer à l'utiliser dès que vous recevrez votre prochain capteur. Pour obtenir de l'aide, consultez l'annexe B.

Annexe

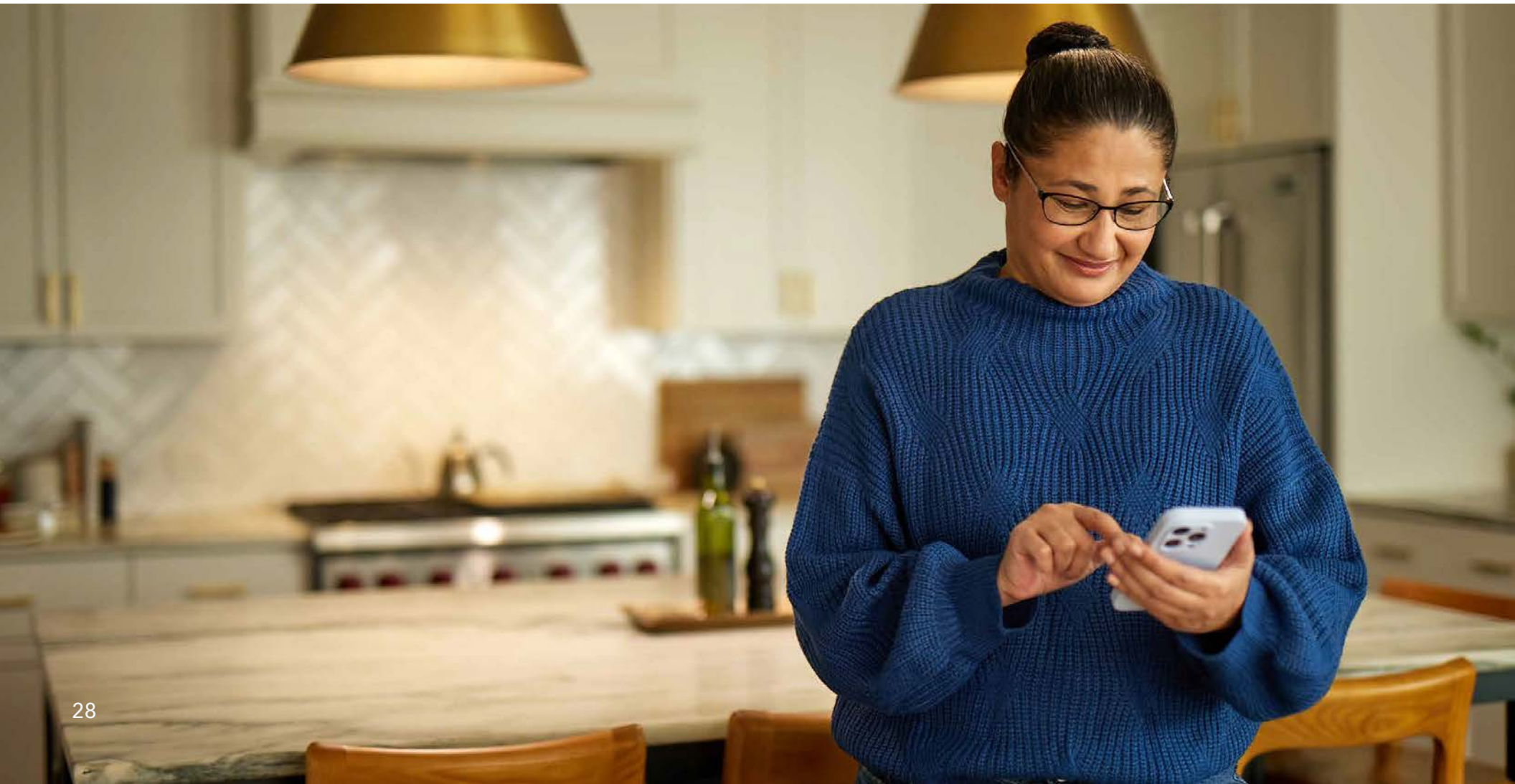


Annexe A: désappairez et réappairez votre pompe et votre téléphone

Étape 1. **Désappairez et appairez votre pompe et votre téléphone.** Vous devez désappairer votre appareil mobile de votre pompe. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

Sur votre téléphone :




Sur votre pompe :

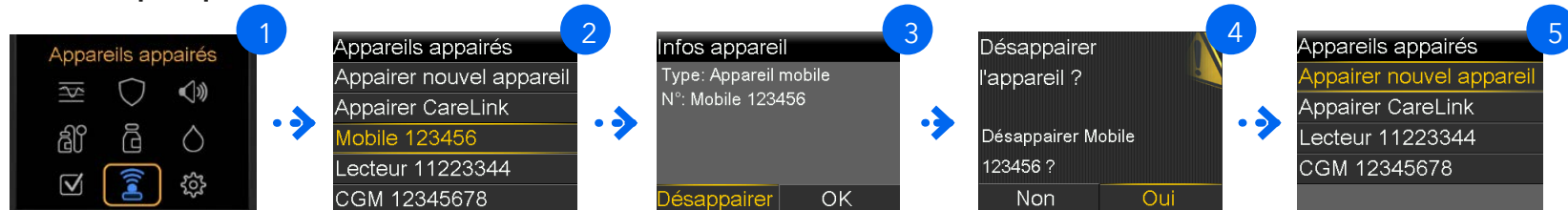


Allez sur votre téléphone et appuyez sur **Suivant**.

Étape 2. Supprimez votre pompe de votre téléphone. Vous devez basculer vers les réglages de votre téléphone, puis **revenir à l'application MiniMed^{MC} Mobile lorsque vous avez terminé** (exemples iOS et Android illustrés).

Exemple iOS

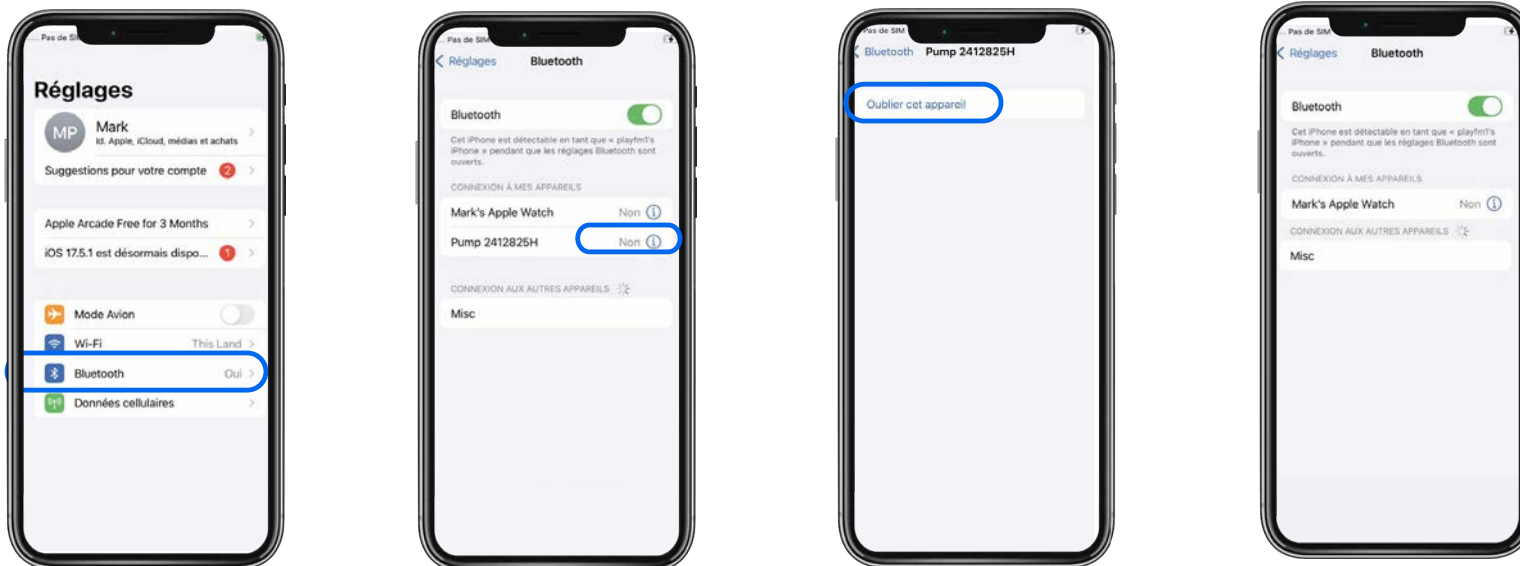

Exemple Android

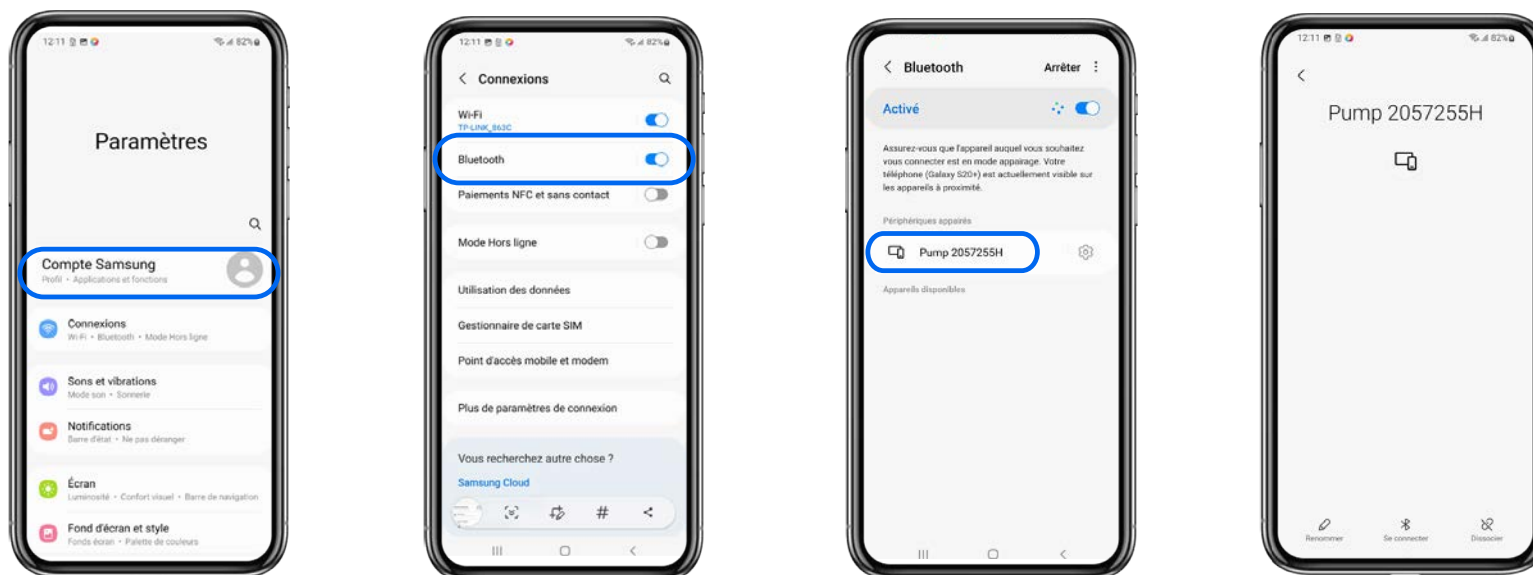


Étape 3. Confirmez que vous avez supprimé votre pompe de votre téléphone, appuyez sur **Suivant** et sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle.



Étape 4. **Apparez votre téléphone et votre pompe.** Votre application affichera les instructions.




Sur votre pompe :

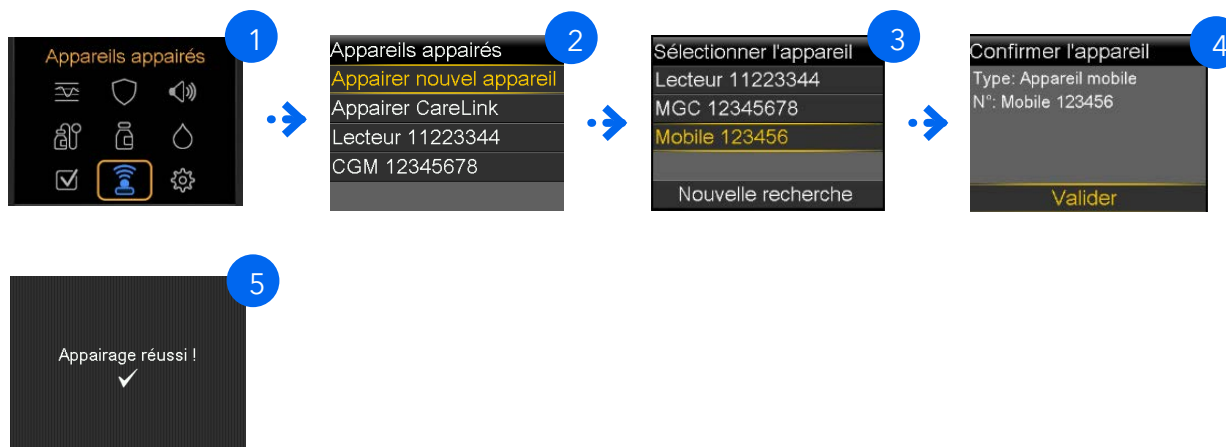

Sur votre téléphone :



Sur votre pompe :

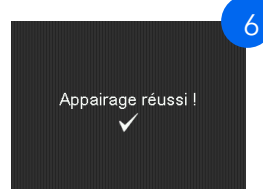

C'est bon!


Rendez-vous sur votre téléphone pour démarrer automatiquement la **vérification du logiciel de 15 minutes** (page 22).

*L'écran peut varier selon la marque, le modèle ou le système d'exploitation de votre téléphone.

Annexe B : connexion d'un capteur Simplera Sync^{MC}

Cette section explique comment connecter un capteur Simplera Sync^{MC} à une pompe à insuline MiniMed^{MC} 780G et suppose qu'un transmetteur Guardian^{MC} est déjà utilisé. Dans le cas contraire, commencez à l'étape 2. Toutes les actions sont réalisées sur votre pompe.


Étape 1 : supprimez votre capteur/transmetteur Guardian^{MC} existant.

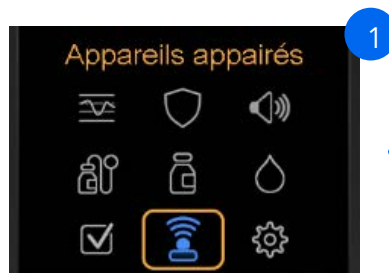

Accédez à **Appareils appairés**.



Sélectionnez votre capteur actuel.

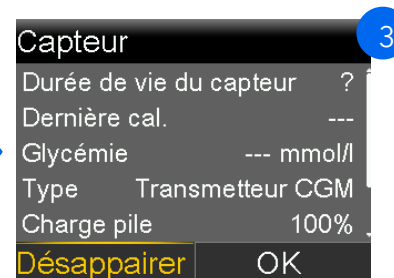


Sélectionnez **Désappairer**, puis confirmez en sélectionnant **Oui** sur l'écran suivant.



Numérisez ce code pour visionner la vidéo d'insertion du capteur

Étape 2 : appairez votre capteur Simplera Sync^{MC}.

D'abord, insérez le capteur en suivant les étapes du Guide d'utilisation du système. Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus pour visionner une courte vidéo sur le processus. Ensuite, sur votre pompe :

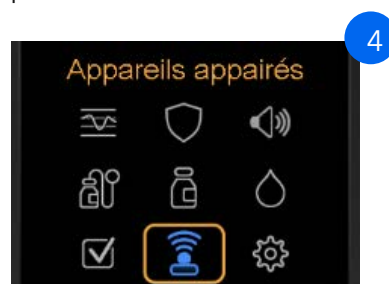

Accédez à **Appareils appairés**.



Sélectionnez **Appairer nouvel appareil**.



Sélectionnez le **numéro de l'appareil CGM** qui correspond au numéro de série situé sur le dessus de l'inserteur.

Remarque : si le capteur Simplera Sync^{MC} n'est pas appairé à la pompe dans les 20 minutes suivant le retrait du capuchon de l'inserteur, suivez les étapes ciaprès concernant l'appairage manuel du capteur. Sinon, rendezvous à la page suivante.




Saisissez manuellement le CODE qui figure sur l'étiquette de l'inserteur du capteur.



Sélectionnez **Valider** pour appairer le capteur et passez à la page suivante.



L'écran **Confirmer le CODE** apparaît. Confirmez que le code à l'écran correspond au CODE figurant sur l'inserteur.

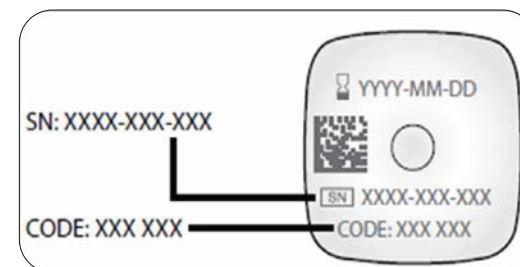

Le capteur Simplera Sync^{MC} sera désormais appairé à la pompe et l'initialisation de 2 heures du capteur démarrera. Lorsque l'initialisation se termine, la pompe affiche les mesures de glucose du capteur.



Remarque : pour les futurs changements de capteur Simplera Sync^{MC}, appairez simplement votre nouveau capteur et l'ancien se déconnectera automatiquement. Aucun désappairage n'est nécessaire.

Annexe C : changez votre dispositif et votre réservoir



Scannez ce code QR pour visiter la page d'assistance relative au cathéter et accéder à des documents pédagogiques adaptés à votre dispositif spécifique. <https://www.minimed.com/fr-ca/soutien/soutien-technique/dipositifs-de-perfusion-assistance>

Annexe D : dépannage

Mon application MiniMed^{MC} Mobile et mon téléphone ne s'appairent pas.

Supprimez votre téléphone de votre pompe et votre pompe de votre téléphone. Redémarrez votre téléphone et réessayez. Si le problème persiste, appelez notre équipe d'experts au 1-800-284-4416.

J'ai effectué une fermeture forcée de l'application au cours du téléchargement. Comment dois-je redémarrer?

Si vous avez fermé l'application alors que le téléchargement était en cours, vous devez reprendre le téléchargement depuis le début. Pour ce faire, allez dans le menu en haut à gauche de l'écran d'accueil, puis appuyez sur «Mettre la pompe à jour » pour recommencer le processus de mise à jour du logiciel.

L'option de menu «Mettre la pompe à jour » ne figure pas dans mon application.

Cela signifie que vous n'avez pas la possibilité, dans votre pays, de mettre à jour les dispositifs de la série MiniMed^{MC} 700 via l'application MiniMed^{MC} Mobile. Appelez notre équipe d'experts au 1-800-284-4416 pour obtenir plus d'informations.

L'application MiniMed^{MC} Mobile indique que ma pompe est à jour ou que des étapes supplémentaires sont nécessaires.

Passez en revue les informations concernant votre message d'admissibilité. Assurez-vous que toutes les étapes ont été effectuées, puis réessayez dans 24 heures. Si le problème persiste, appelez notre équipe d'experts au 1-800-284-4416.

La mise à jour a échoué.

Votre pompe est revenue à sa version logicielle d'origine. Vous pourrez réessayer la mise à niveau ultérieurement. Si le problème persiste, appelez notre équipe d'experts au 1-800-284-4416 .

La confirmation de la mise à jour a échoué.

Vérifiez votre connexion Internet et réessayez. Si le problème persiste, appelez notre équipe d'experts au 1-800-284-4416.

Informations de sécurité importantes

SYSTÈME MINIMED^{MC} 780G AVEC TECHNOLOGIE SMARTGUARD^{MC} ET CAPTEUR SIMPLERA SYNC^{MC}

Le système MiniMed 780G est conçu pour être utilisé par des patients âgés de 7 ans et plus atteints de diabète de type 1 ou par des patients âgés de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 dont la dose totale quotidienne d'insuline est de 8 unités par jour ou plus.

Le système est également destiné à mesurer en continu les valeurs de glucose dans le liquide sous la peau. Le système MiniMed 780G est doté de la technologie SmartGuard qui peut être programmée pour ajuster automatiquement l'administration d'insuline en fonction des valeurs de glucose du capteur de la mesure du glucose en continu (CGM) et peut arrêter temporairement l'administration d'insuline lorsque la valeur de glucose du capteur descend en dessous ou est susceptible de descendre en dessous des valeurs de seuil prédéfinies.

N'utilisez pas les valeurs de glucose du capteur pour prendre des décisions liées au traitement alors que la pompe est en mode Manuel. Les valeurs de glucose du capteur peuvent uniquement être utilisées pour prendre des décisions liées au traitement alors que la fonction SmartGuard est active. Ces décisions thérapeutiques utilisant le glucose du capteur font uniquement référence aux bolus et aux bolus de correction automatique alors que la fonction SmartGuard est active. Les valeurs de glucose du capteur et de glycémie peuvent différer. Si la mesure de glucose du capteur est basse ou haute, ou en présence de symptômes d'un glucose bas ou haut, confirmez la mesure de glucose du capteur à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre des décisions thérapeutiques afin d'éviter une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

Le système MiniMed 780G n'est pas destiné à être utilisé pendant la grossesse.

Informations de sécurité importantes

SYSTÈME MINIMED^{MC} 780G AVEC TECHNOLOGIE SMARTGUARD^{MC} AVEC CAPTEUR GUARDIAN^{MC} 4

La pompe à insuline MiniMed 780G est indiquée pour être utilisée par des patients âgés de 7 ans et plus atteints de diabète de type 1 ou par des patients âgés de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 dont la dose totale quotidienne d'insuline est de 8 unités par jour ou plus.

Le système MiniMed 780G est destiné à l'administration continue d'insuline basale à des débits sélectionnables ainsi qu'à l'administration de bolus d'insuline à des quantités sélectionnables. Le système est aussi destiné à mesurer en continu les valeurs de glucose dans le liquide sous la peau. Le système MiniMed 780G inclut la technologie SmartGuard qui peut être programmée pour fournir un ajustement automatique de l'administration d'insuline sur la base de la mesure du glucose en continu (CGM) et peut arrêter temporairement l'administration d'insuline lorsque la valeur de glucose du capteur descend en dessous, ou est susceptible de descendre en dessous, des valeurs de seuil prédéfinies.

N'utilisez pas les valeurs de glucose du capteur pour prendre des décisions liées au traitement alors que la pompe est en mode Manuel. Les valeurs de glucose du capteur peuvent uniquement être utilisées pour prendre des décisions liées au traitement alors que la fonction SmartGuard est active. Ces décisions thérapeutiques reposant sur le glucose du capteur ne concernent que les bolus et les bolus de correction automatique lorsque la fonction SmartGuard est active. Les valeurs de glucose du capteur et de glycémie peuvent différer. Si la mesure de glucose du capteur est basse ou haute, ou en présence de symptômes d'un glucose bas ou haut, confirmez la mesure de glucose du capteur à l'aide d'un lecteur de glycémie avant de prendre des décisions liées au traitement afin d'éviter une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

Le système MiniMed 780G n'est pas destiné à être utilisé pendant la grossesse.

[illegible]

[illegible]

99, rue Hereford, 3^e étage
Brampton, Ontario L6Y 0R3
Canada

Sans frais: 1 (800) 284-4416

(Service à la clientèle, soutien technique 24 heures sur 24, vérification d'assurance, commande de fournitures,
demandes de renseignements sur les paiements)

www.minimed.com

© 2026 Medtronic MiniMed. MiniMed et le logo MiniMed sont des marques de commerce de Medtronic MiniMed, Inc.

^{MC*} Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques
sont des marques de commerce d'une société MiniMed.

MMT-2703FR



(01)00763000770495(10)642FY27

