


Carte de référence rapide

Medtronic

MiniMed™ 780G




Menu principal

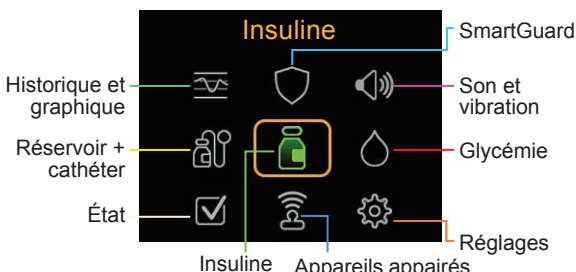


Historique et graphique Historique Revue glucose capteur* Graphique Durée dans la cible*	SmartGuard List. vérif. SmartGuard Objectif temp.* Réglag. de SmartGuard* SmartGuard*
Son et vibration Alert. du capt. sur silence* Volume Son Vibreur Réglages d'alerte	Réservoir + cathéter Nouv. réservoir + cath. Nouv. réserv. uniquem. Nouv. cathéter uniquem. Purge canule*
Insuline Bolus Basal Arrêt temp. toutes admin. Réglages administration	Glycémie Saisir glycémie
État Arrêt temp. toutes admin. List. vérif. SmartGuard Pompe Capteur*	Appareils appairés Appairer nouvel appareil Appairer CareLink Mobile** Lecteur** CGM**
Réglages Réglages d'alerte Réglages administration Réglages de l'appareil	<i>*Dans certains cas, des choix de menu apparaissent, mais sont grisés si certains réglages sont activés ou désactivés.</i> <i>**Les choix de menu apparaissent lorsque l'appareil est appairé à la pompe.</i>

Écran d'accueil sans la CGM en mode manuel

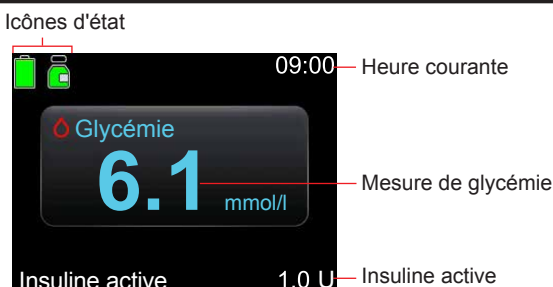


Écran d'accueil avec la CGM en mode Manuel

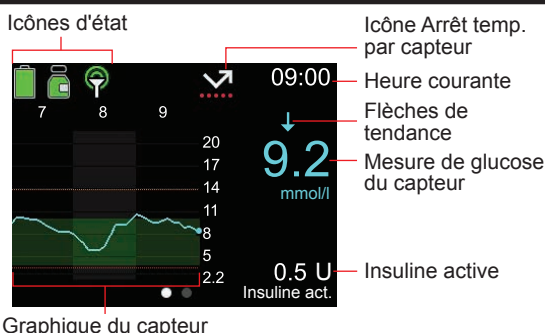

Écran d'accueil de la fonction SmartGuard™

Icônes d'état

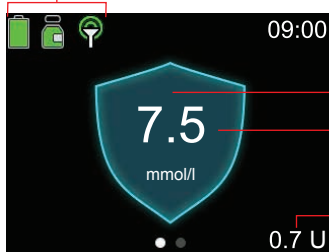

Arrêt et reprise de l'administration d'insuline

Arrêt de toutes les administrations d'insuline

L'option Arrêt temp. toutes admin. arrête toutes les administrations d'insuline (basales et bolus).

Pour arrêter toutes les administrations d'insuline :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez .
2. Sélectionnez **Arrêt temp. toutes admin.**
3. Sélectionnez **Oui** à l'invite.

Reprise de l'administration d'insuline basale

L'option Reprendre déb. basal redémarre l'administration basale après l'arrêt temporaire de la pompe. L'option Reprendre déb. basal ne redémarre pas l'administration d'un bolus.

Pour reprendre l'administration d'insuline basale :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez .
2. Sélectionnez **Reprendre déb. basal.**
3. Sélectionnez **Oui** à l'invite.

REMARQUE : L'administration d'insuline basale peut être reprise manuellement au cours d'un événement Arrêt avant hypo ou Arrêt hypo.

Arrêt de l'administration d'un bolus

L'option Arrêt bolus arrête uniquement l'administration d'un bolus. L'option Arrêt bolus n'arrête pas l'administration basale.

Pour arrêter un bolus normal ou la partie normale d'un bolus duo (Dual Wave™) :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez .
2. Sélectionnez **Arrêt bolus.**
3. Sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité.
4. Sélectionnez **Terminé.**

Pour arrêter un bolus carré (Square Wave™) ou la partie carrée d'un bolus duo (Dual Wave™) :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez .
2. Sélectionnez **Bolus.**
3. Sélectionnez **Arrêt bolus.**
4. Sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité.
5. Sélectionnez **Terminé.**

Reprise manuelle de l'administration d'insuline basale au cours d'un événement Arrêt avant hypo ou Arrêt hypo

Si vous ne pouvez pas attendre que la pompe reprenne automatiquement l'administration d'insuline basale durant un événement Arrêt avant hypo ou Arrêt hypo, reprenez manuellement l'administration basale.

Pour reprendre manuellement l'administration d'insuline basale :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez .
2. Sélectionnez **Reprendre déb. basal.**
3. Sélectionnez à nouveau **Reprendre déb. basal.**
4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Oui.**

© 2023 Medtronic. Medtronic et le logo Medtronic sont des marques commerciales de Medtronic.

™* Les marques tierces sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société de Medtronic.

MiniMed™, SmartGuard™, Dual Wave™ et Square Wave™ sont des marques commerciales de Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

C €0459

2023-11-22

M028312C012_1