

Medtronic

Engenharia para o extraordinário

Guia rápido

Conjunto de infusão Extended™

Este guia irá mostrar os passos para colocação do conjunto de infusão Extended™ que são utilizados com os sistemas de infusão de insulina da Medtronic.





Conjunto de infusão e reservatório Extended™ permanecem aplicados por até 7 dias

Dependendo da necessidade de insulina seu reservatório poderá durar menos de 7 dias. Nestes casos, troque somente o reservatório sem aplicar um novo cateter, inserindo o novo reservatório com insulina suficiente para durar até a troca do conjunto de infusão.

Quando trocar o conjunto de infusão troque também o reservatório.




Trocando o conjunto de infusão e reservatório Extended™

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G


Comece aqui

1

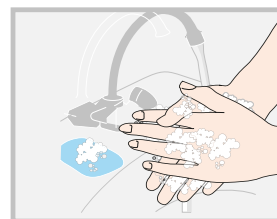


Lave suas mãos.

2

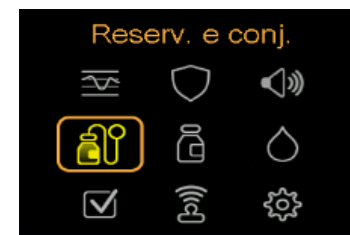


Vá na função Reserv. e conj. dentro do menu.

3

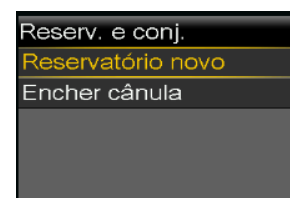


Selecione Reservatório novo.

4

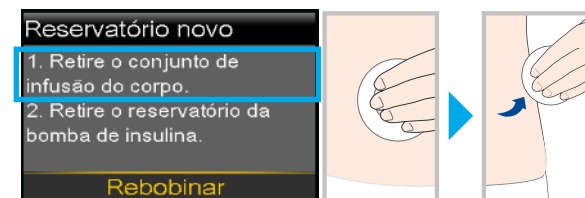


Remova o conjunto de infusão que estava utilizando do corpo, remova também o adesivo com a cânula.

5

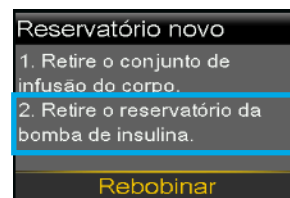


Remova o reservatório que está conectado na bomba.

6

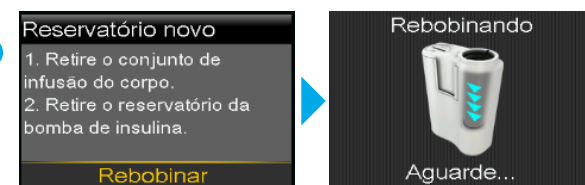

Com o conjunto de infusão removido do corpo e o reservatório fora da bomba, selecione Rebobinar.


Continue com "Encher o reservatório" na próxima página.

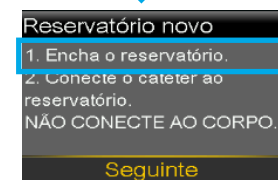


Trocando o conjunto de infusão e reservatório Extended™

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G


Enchendo o reservatório

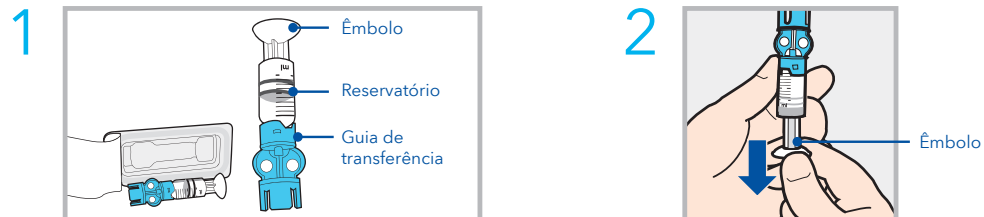


Remova da embalagem o reservatório. Certifique-se que o frasco de insulina esteja em temperatura ambiente para evitar o risco de bolhas.

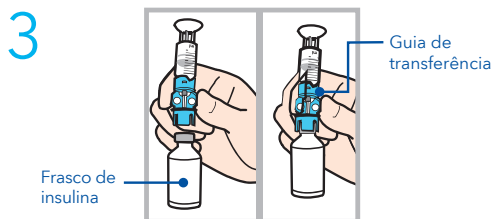

Limpe o frasco com álcool. Coloque o frasco em uma superfície. Encaixe e pressione o conector azul do reservatório contra a tampa do frasco.

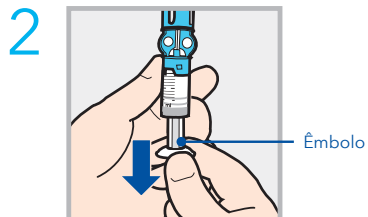


Puxe o êmbolo para baixo até a quantidade que você planeja preencher com insulina.

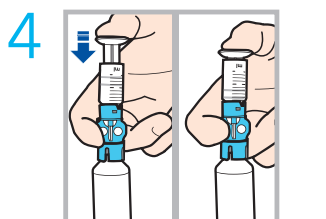


Aperte e segure o êmbolo até embaixo.


Enchendo o reservatório (continuação)

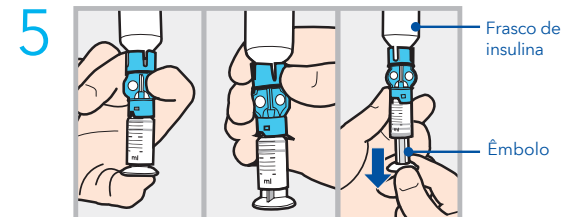


Com o dedo ainda no êmbolo, vire o frasco de insulina para cima. Retire o dedo e puxe o êmbolo para baixo para encher o reservatório com insulina.

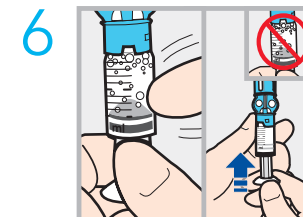

Bata no reservatório para remover as bolhas de ar para a parte superior do reservatório. Pressione o êmbolo para cima para retirar as bolhas do reservatório.

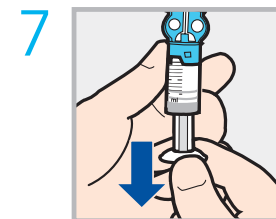

Puxe o êmbolo para baixo até a quantidade de insulina que você precisa.

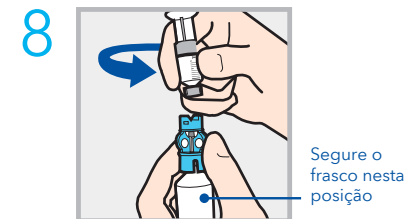

Para evitar que fique insulina na parte de cima do reservatório, vire o frasco para baixo. Segure o guia de transferência e gire o reservatório em sentido anti-horário e remova da peça azul.

⚠ Alerta:


Não utilize o reservatório ou conjunto de infusão se qualquer líquido ficar na parte superior do reservatório ou dentro do conector do cateter. O líquido pode temporariamente bloquear a passagem, resultando em menor ou maior infusão de insulina, podendo ocasionar hipoglicemia ou hiperglicemia. Se qualquer líquido ficar na parte superior do reservatório ou dentro do conector do cateter utilize um novo conjunto de infusão e/ou reservatório.


Fale com seu profissional médico para guiá-lo no tratamento de hipoglicemias como parte de sua terapia com insulina.


Trocando o conjunto de infusão e reservatório Extended™


Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G

Conectando o reservatório ao conjunto de infusão

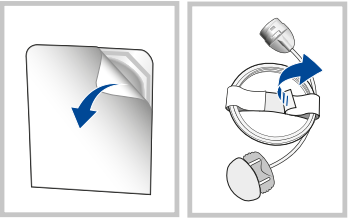- 

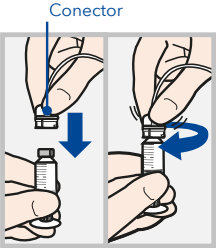
Remova o conjunto de infusão da embalagem. Remova o papel que segura o cateter e desenrole.
- 

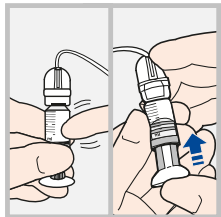Com cuidado, pressione o conector do cateter no reservatório e gire em sentido horário até travar. Você irá escutar um clique.
- 

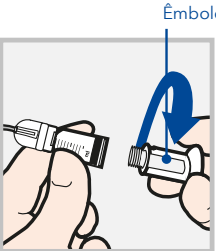
Se você observar bolhas no reservatório bata para removê-las. Pressione levemente o êmbolo para empurrar um pouco de insulina para o cateter.
- 


Gire o êmbolo para remove-lo.

Colocando o reservatório na bomba

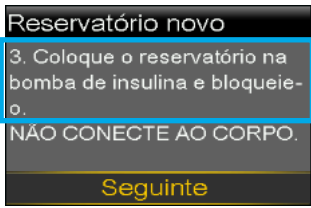- 

Reservatório novo
3. Coloque o reservatório na bomba de insulina e bloqueie-o.
NÃO CONECTE AO CORPO.
Seguinte

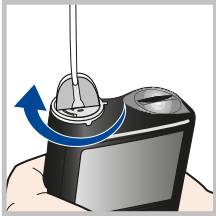Coloque o reservatório na bomba.
- 

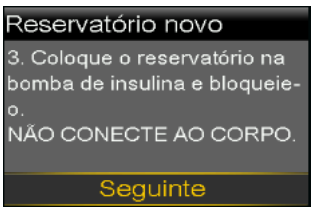Gire o reservatório em sentido horário até travar.
- 

Reservatório novo
3. Coloque o reservatório na bomba de insulina e bloqueie-o.
NÃO CONECTE AO CORPO.
Seguinte

Selecione Seguinte.

Importante:
Nunca preencha o cateter com ele conectado ao corpo.

Neste momento a tela da bomba pode ter se apagado.

Pressione qualquer botão para acendê-la.

Pressione  para abrir o menu. Se sua bomba esta bloqueada, você precisará pressionar  para destrava-la.

Selecionar Instalar Reservatório.



Selecionar Seguinte.

Trocando o conjunto de infusão e reservatório Extended™

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G


Instalando o reservatório e preenchendo a cânula



Selecione Instalar e mantenha pressionado o botão .





Quando aparecer na tela a mensagem de concluído selecione Seguinte.

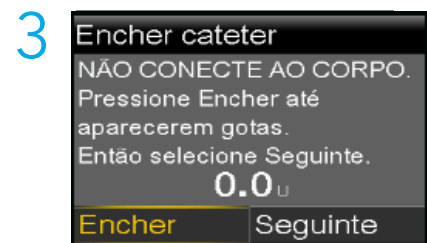

Um novo cateter e reservatório: Remova a tampa branca apertando a lateral com ranhuras do conector e ao mesmo tempo puxe a tampa branca.


Selecione Encher e mantenha pressionado até que pequenas gotas de insulina caiam na ponta da agulha.

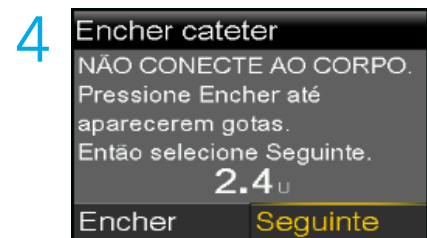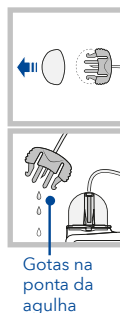


Observação quando estiver trocando somente o reservatório: Após conectar o cateter ao novo reservatório pressione e segure até todas as bolhas desaparecerem do cateter.

Após ver as gotas pressione a seta para o lado  e selecione Seguinte.


Colocando o conjunto de infusão

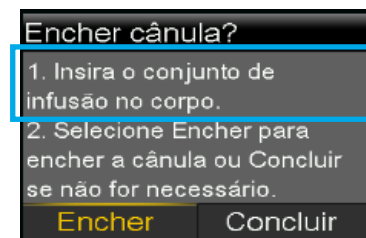


Deixe a bomba de lado.

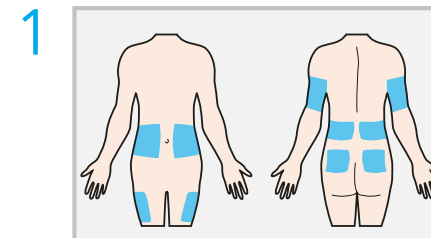

Selecione o local de aplicação, você poderá aplicar onde está indicado em azul na imagem. Higienize com álcool 70% líquido ou outro antisséptico no local escolhido para aplicar.

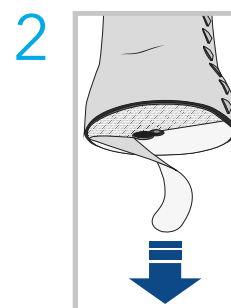

Remova a proteção do adesivo. Tome cuidado para não tocar no adesivo.

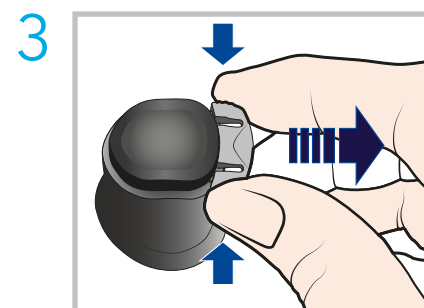


Remova e desconecte a tampa de desconexão (a peça que trava o botão) apertando gentilmente a lateral e puxando a tampa.

Guarde esta tampa que retirou para conectar na cânula sempre que necessitar desconectar o cateter.


Trocando o conjunto de infusão e reservatório Extended™

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G


Aplicando o conjunto de infusão (continuação)

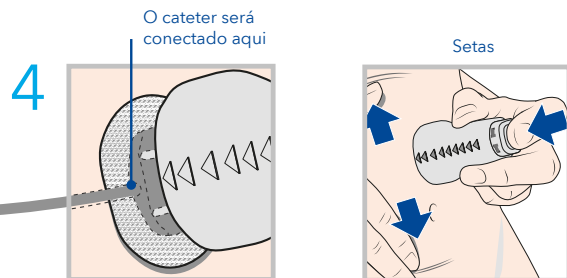


As setas para baixo no aplicador indicam a direção que o cateter ficará conectado ao corpo. Suavemente estique a pele no local onde aplicará a cânula e posicione o dispositivo onde deseja aplicar. Então, pressione o botão localizado na parte de cima do aplicador para inserção da cânula.

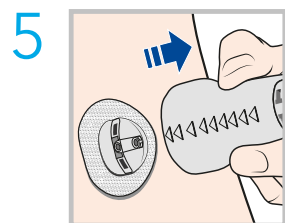

Com cuidado remova o aplicador puxando ele para fora do corpo.

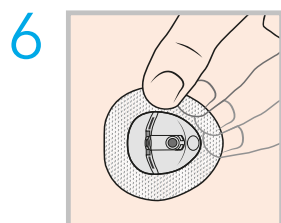


Pressione com seus dedos o adesivo na pele. Reaplique o conjunto de infusão se o adesivo não aderir a pele.

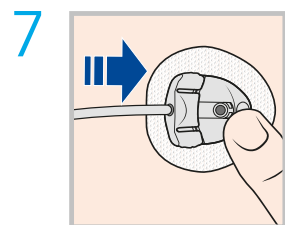


Segure suavemente o encaixe da cânula com o dedo. Em seguida, empurre o conector contra o encaixe até escutar um clique.

Importante: Descarte o aplicador em um recipiente apropriado para materiais perfuro-cortantes e de acordo com as leis locais.

Preenchendo a cânula

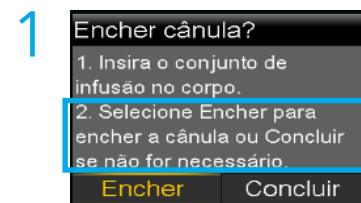


Selecione Encher.

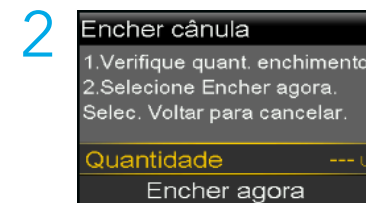


Coloque 0.600 U no campo quantidade e selecione Encher agora.

Importante: Sua bomba lembrará a quantidade de enchimento que você usou por último. Sempre verifique se a quantidade de preenchimento esta correta.

- Se estiver correto, pressione e selecione Encher agora confirmando com o botão .
- Se estiver incorreto, pressione e mude para a quantidade correta, após isso confirme em .

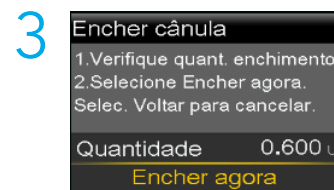

Selecione Encher agora.

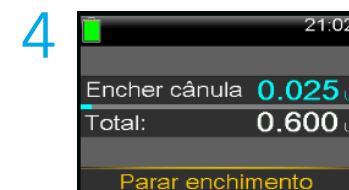

A tela exibirá a insulina durante o enchimento.

Importante: Só selecione Parar enchimento se você precisar parar. Por exemplo, se notar que a quantidade informada esta incorreta. Isso raramente acontece se você verificou a quantidade de preenchimento na tela anterior.

Agora seu conjunto de infusão esta pronto.

Lembre-se de verificar a glicemia 1-3 horas após a troca do conjunto de infusão.

Trocando somente o reservatório*

Extended™

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G


Começe aqui




Lave suas mãos.




Vá na função Reserv. e conj. dentro do menu.

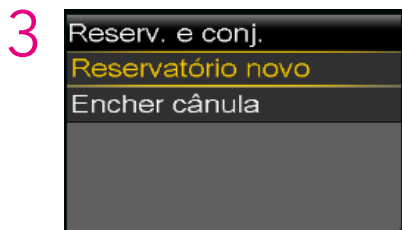



Selecione Reservatório novo.

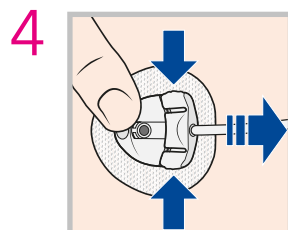

Quando mudar somente o reservatório: Desconecte o cateter do encaixe da cânula. Não remova a cânula do corpo.

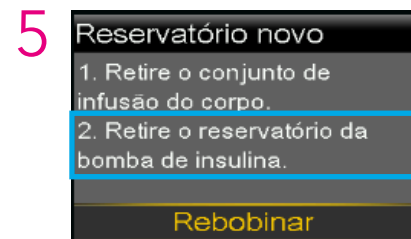

Remova o reservatório usado da bomba

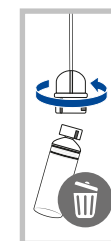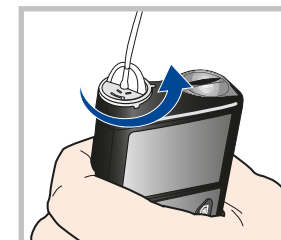

Importante: Descarte o reservatório usado em um recipiente apropriado de acordo com as leis locais.

Desconecte o conector do cateter do reservatório usado. Coloque o cateter em uma superfície e não jogue fora.



Com o reservatório desconectado da bomba, selecione Rebobinar

Para os próximos passos de Enchendo o reservatório, Conectando o reservatório ao conjunto de infusão, Instalando o reservatório na bomba, siga as instruções das páginas 4 a 8 para então seguir para a próxima página.

Trocando somente o reservatório* Extended™

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G

Alerta:

Não encha a cânula! Selecione Concluir. Ao reconectar o conjunto de infusão após a troca somente do reservatório, encher a cânula pode resultar na entrega a mais de insulina e ocasionar hipoglicemia.

1

Encher cânula?


1. Insira o conjunto de infusão no corpo.
2. Selecione Encher para encher a cânula ou Concluir se não for necessário.

Encher

Concluir

Não é necessário encher a cânula por que não houve troca do conjunto de infusão. Pressione > e selecione Concluir.

2

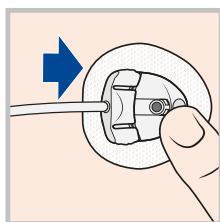

Segure suavemente o encaixe da cânula com o dedo. Em seguida, empurre o conector contra o encaixe até escutar um clique.

Fale com seu médico para auxiliá-lo no tratamento de hipoglicemia como parte de sua terapia de insulina.

A troca do seu reservatório esta completa.


Lembre-se de checar sua glicemia 1 a 3 horas após a troca do reservatório.

Desconectando e conectando o conjunto de infusão Extended™ do corpo

Com o sistema MiniMed™ 640G e 780G


Desconectando o cateter do corpo

1

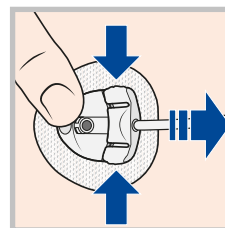


Segure gentilmente o encaixe da cânula com seu dedo e aperte as ranhuras na lateral do conector e retire o cateter.

2

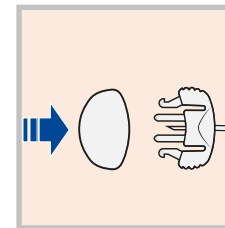

Coloque a tampa branca no conector

3

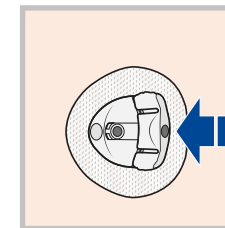


Coloque a tampa de desconexão no encaixe da cânula. Pressione a tampa até escutar um clique.

Reconectando o cateter ao corpo

1

Verifique se não há ar no cateter. Se houver presença de ar preencha o cateter conforme as instruções já fornecidas neste documento.

2

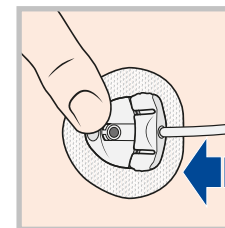

Segure suavemente o encaixe da cânula com o dedo. Em seguida, empurre o conector contra o encaixe até escutar um clique.

Conjunto de infusão e reservatório Extended™* para uso por até 7 dias



Informações de segurança

Para a lista de indicações, contra-indicações, precauções, cuidados e potenciais efeitos adversos, verifique as Instruções de Uso (IFU) do Conjunto de infusão e reservatório Extended™.

Verifique o manual das bombas de insulina Medtronic para obter a lista de insulinas e cateteres compatíveis.

*Compatível somente com as bombas MiniMed™ 640G e 780G

Dúvidas?

Entre em contato com nosso suporte técnico 0800 773 9200 ou com seu especialista clínico.

Registro ANVISA: Conjunto de infusão e reservatório Extended™: 10349009043, MiniMed™ 780G: 10349001315, MiniMed™ 640G: 10349000912 ©2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logotipo da Medtronic e Engenharia para o extraordinário são marcas registradas da Medtronic. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa Medtronic.

Medtronic